

zu beziehen bei  
sold by  
[www.conatex.com](http://www.conatex.com)



## LCD-Digitalstoppuhren STRATOS

Zeitmeßbereich: 9 h, 59 min., 59 sec., 99/100 sec.

Zeitmeßeinheit: 1/100 sec.

Einsatzbereich: - 10° C bis + 55° C

Batterie: Knopfzelle 1,55 V, Type 389

Batterie einlegen: Batteriefach auf der Gehäuse-  
rückseite mit einer Münze öffnen.  
Batterie herausklopfen.  
Neue Batterie mit Plus-Pol nach  
oben einsetzen.  
Deckel wieder schließen.

Betriebsdauer: ca. 1 Jahr  
mit einer guten Batterie.




# STRATOS 1 + STRATOS 2

zu beziehen bei

sold by

[www.conatex.com](http://www.conatex.com)

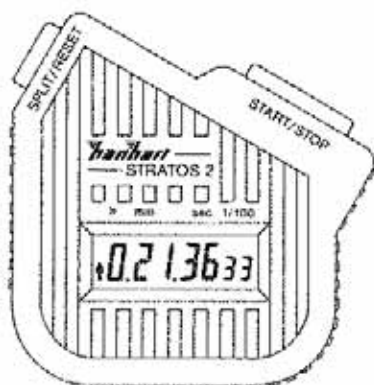

**Nullstellung:** Druck auf Taste *Reset*  
(*Split / Reset*)

## **Start / Stop**

Start: Druck auf Taste *Start / Stop*

Stop: Druck auf Taste *Start / Stop*

Nullstellung: Druck auf Taste *Reset*  
(*Split / Reset*)

## **Addition**

Start: Druck auf Taste *Start / Stop*

Stop: Druck auf Taste *Start / Stop*  
Zeitmessung ist unterbrochen,  
Symbol  in der Anzeige.  
Wiederholung *Start / Stop*  
beliebig oft möglich.

Nullstellung: Druck auf Taste *Reset*  
(*Split / Reset*)

zu beziehen bei  
sold by  
[www.conatex.com](http://www.conatex.com)



## STRATOS 2

- Split:** Zwischenzeiten
- Start:** Druck auf Taste *Start/Stop*
- Zwischenzeit I:** Druck auf Taste *Split/Reset*  
Zwischenzeit wird eingeblendet.  
Die Zeit läuft intern weiter –  
Kennzeichnung durch Symbol  in der Anzeige. Bei einem  
weiteren Druck auf Taste  
*Split/Reset*
- Zwischenzeit II:** Druck auf Taste *Split/Reset*  
Vorgang wie bei Zwischenzeit I –  
kann beliebig oft wiederholt  
werden.
- Stop:** Druck auf Taste *Start/Stop*.  
In der Anzeige erscheint das  
Symbol  für die Abstopfung  
und die Endzeit.
- Nullstellung:** Druck auf Taste *Split/Reset*
- Dualzeit:** Messung von zwei kurz aufein-  
anderfolgenden Zeiten.
- Start:** Druck auf Taste *Start/Stop*
- Zeit I:** Druck auf Taste *Split/Reset*
- Zeit II:** Druck auf Taste *Start/Stop*
- ablesen:** Zeit I ist sofort von der Anzeige  
ablesbar. Symbol    
Zeit II = Druck auf Taste  
*Split/Reset*  
Symbol 
- Nullstellung:** Druck auf Taste *Split/Reset*